

# 恒温磁力搅拌水/油浴锅 (集成式)

新产品

新一代油浴锅是抗腐蚀不锈钢与微电脑结合，提供给您安全性和稳定性，而且操作方便和简单。

## 产品特点


- 槽内配置磁力搅拌器，具有良好的温度均匀性，同时对样品进行搅拌；
- 采用水、油两用设计，加热管选用304不锈钢材料；
- 可以用作水浴或油浴，浴槽内设强磁力搅拌；
- 磁力搅拌机构带动槽内的搅拌子同步旋转，使浴槽内溶液旋转，受热均匀；
- 选用高温磁铁，能在高温范围长期连续使用不失磁；
- 温度控制采用PID方式，控温精度高；
- 旋钮调节和LCD液晶显示，操作简单；
- 内有双传感器，液槽内温度和反应容器内温度可转换显示；

## 安全功能

- 独立限温报警系统，保证实验安全运行不发生意外；
- 水浴/油浴锅体由耐高温阻燃材料制成；
- 可在通风厨内使用，防止溶剂扩散到实验室；
- 高性能直流无刷电机，性能稳定，可连续使用；



独立限温报警系统

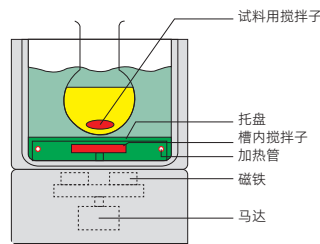

内部构件示意图

## 技术参数

指标 型号	温度波动度	转速(rpm)	浴槽尺寸(内) φ×H(mm)	浴槽容积	加热功率	最大可放置烧瓶	浴锅控温范围	电源	价格
DU-3GW	±0.5℃	0~1800	φ230×130	5.5L	1000W	3000mL	RT+5 ~ 99℃	220V 50Hz	<b>RMB3690</b>
RT+5 ~ 200℃							<b>RMB4790</b>		

注：高度不含传感器支架

步入式药品试验室 83

老化试验箱 84  
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85  
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外耐候试验箱 89  
90

氙灯耐候试验箱 91  
盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93  
96

旋转蒸发仪 97  
分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101  
循环冷却器 102

干式冷阱 103  
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108  
氮吹仪 109

离心机 110  
漩涡匀仪 110

多管漩涡匀仪 111  
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114  
均质分散机 115

粘度计 117  
122

油浴锅